

Začněte zde

→ Příprava k aplikaci injekce

Cílem této příručky je poskytnout rychlou referenci pro bezpečnou a účinnou aplikaci injekce.

Před aplikací injekce přípravku Benepali® si prostudujte **návod k použití a příbalovou informaci**, kde jsou uvedeny důležité informace, které byste si měli pamatovat. Mezi ně patří informace o možných alergických reakcích, vedlejších účincích a okolnostech, za kterých je zakázáno používat přípravek Benepali®.

(pFfen) CZ, verze 1.0

Postup aplikace injekce Benepali® perem Benepali®

Pero Benepali® nemá žádné tlačítko, což zjednodušuje správnou aplikaci injekce. **Automatické injekční zařízení** na etikercept od společnosti Biogen je **kompaktní a lehké**. Etikercept je účinná látka přípravku Benepali®. Před použitím přípravku Benepali® a pokud je, když obdržíte nové balení na základě lékařského předpisu, si přečtěte **návod k použití a příbalovou informaci**, kde jsou obsaženy důležité informace. Mohou obsahovat nové informace.


Nepokoušejte se si aplikovat injekci, pokud vám váš lékař nebo zdravotní sestra neukázali, jak na to.

Připravte si svůj spotřební materiál

Zvolte si dobře osvětlenou, čistou pracovní plochu a shromážděte:



Nové předplněné pero Benepali® k automatické aplikaci injekce (vyjměte z krabice uložené v chladničce)

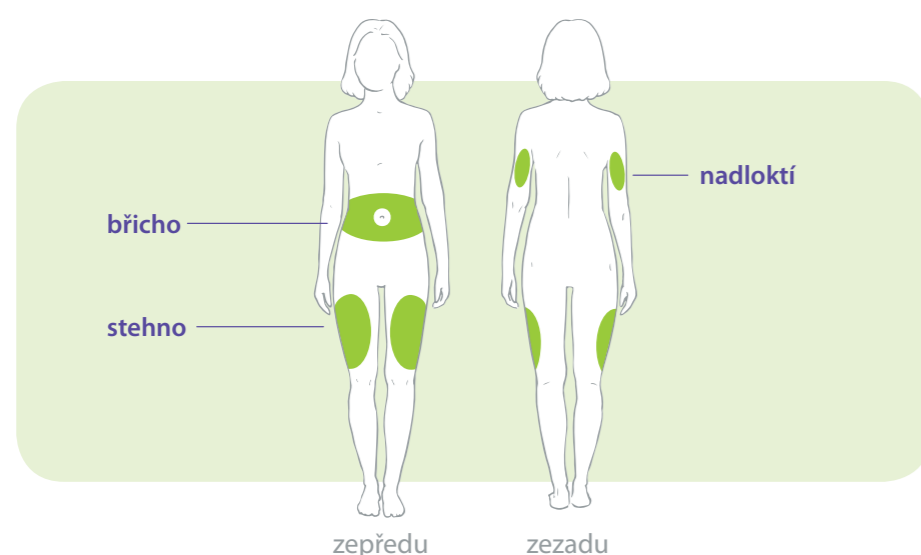

Pečlivě zkontrolujte

Zkontrolujte předplněné pero Benepali®

Nepoužívejte předplněné pero poté, co vypršela **dobu použitelnosti**.

Nepoužívejte předplněné pero, pokud chybí krytka jehly, nebo když není bezpečně připevněna.

Nepoužívejte předplněné pero, pokud spadlo na tvrdý povrch. Může dojít k rozbití součástí uvnitř předplněného pera.

Zkontrolujte roztok

Prohlédněte si léčivý přípravek **kontrolním okénkem**. Léčivý přípravek má být čirý až mírně opalescentní, bezbarvý nebo světle žlutý a může obsahovat malé bílé nebo téměř průhledné částice bílkoviny.

Nepoužívejte roztok, jestliže změnil barvu, je zakalený, nebo jestliže jsou v něm přítomny jiné než výše popsané částice.

Nechte léčivý přípravek dosáhnout pokojové teploty

Počkejte 30 minut

Předplněné pero Benepali® ponechejte za pokojové teploty po dobu nejméně 30 minut. Je to důležité, protože pak bude injekční podání léčivého přípravku snadnější a pohodlnější.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

K ohřátí léčivého přípravku **nepoužívejte** tepelné zdroje, jako je například mikrovlnná trouba nebo horká voda.

Předplněné pero **neprotřepávejte**.

Nesnímejte krytku jehly, dokud nebudete připraven/a injekci podat.



Před aplikací léčivého přípravku počkejte 30 minut

Vyberte si místo vpichu injekce

Vyberte místo, kam aplikovat injekci

Pero Benepali® je určeno k aplikaci podkožní injekce. Injekce se aplikuje do stehna, krajiny břišní (nejméně 5 cm od pupku) nebo zadní strany horní části paže (viz obrázek vlevo).

Pro každou injekci si vyberte vždy jiné místo.

Nepodávejte injekci do místa, které je zarudlé, tvrdé, pohmožděné nebo bolestivé, ani do žizev nebo strůj.

Jestliže máte lupénku, **nesmíte podat** injekci do jakkoli vyvýšených, tlustých, červených nebo šupinatých kožních polí ani do lézí.

→ Aplikace injekce pomocí předplněného pera Benepali®



Omyjte si ruce


Omyjte si ruce mýdlem a vodou.



Očistěte místo vpichu

Otřete kůži v místě vpichu tampónem namočeným v alkoholu.

Před podáním injekce se tohoto místa již **nedotýkejte**.

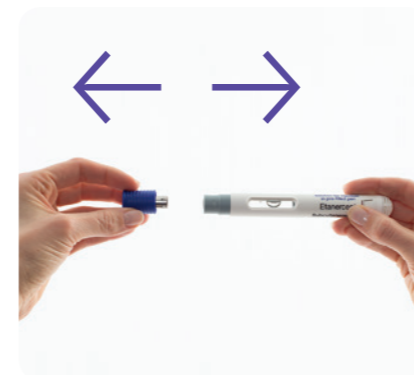

Stáhněte krytku jehly

Modrou krytku jehly stáhněte přímým tahem.

Neotáčejte ani neohýbejte kryt jehly, když jej odstraňujete, protože to může jehlu poškodit.

Nikdy kryt na jehlu znovu nenasazujte.

Krytku zlikvidujte v nádobě na ostré předměty.



Napněte kůži, pero přiložte do správné polohy

Jemně roztáhněte kůži v očištěném místě pro vpich injekce.

Předplněné pero Benepali® držte v úhlu jehlu přibližně **90 stupňů** vůči kůži.

Kůži **nesvírejte**.

Při stisknutí musíte zaslechnout 2 kliknutí



Přidrže ho stisknutý po dobu 15 sekund



Zkontrolujte žlutý píst



Vyjměte a zkontrolujte

Odstraňte prázdné pero z kůže.

Kryt jehly zcela jehlu zakryje.

Zkontrolujte žlutý píst pera v okénku, abyste si ověřili, že byla podána plná dávka.

Po aplikaci injekce



Pero zlikvidujte v souladu s předpisy

Prázdné pero Benepali® zlikvidujte ve schválené nádobě na ostré předměty. Informujte se u svého poskytovatele zdravotní péče na pokyny, jak správně likvidaci plně odpadní nádoby na ostré předměty.

Neodhazujte odpadní nádobu na ostré předměty do domácího odpadu.

Uchovávejte nádobu vždy mimo dohled a dosah dětí.

Kontrola místa vpichu

Pokud dojde ke krvácení v místě vpichu, přitlačte na místo vpichu chomáček bavlny nebo gázu.

Místo vpichu **netřete**.

Podle místo vpichu přelepte náplastí.



Nějaké otázky?

Zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. Viz Návod k použití.

Jestliže vám na vaše otázky neodpoví váš lékař nebo zdravotní sestra, lékařské informace a postupy při hlášení nežádoucích účinků si můžete vyžádat na kontaktních telefonních číslech místních zástupců uvedených v příbalovém letáku.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: www.olecic.cz/hlaseni-prosukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Srobarova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz. Prosíme, do hlášení uvádějte přesný obchodní název a číslo šarže biologického léčiva. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Hlášení může být také zasláno společnosti Biogen (Czech Republic) s.r.o. na adresu: Biogen (Czech Republic) s.r.o. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4 Email: medical-cz@biogen.com Tel.: +420 255 706 208

