

POKYNY PRO POUŽITÍ

Jak používat předplněné pero PegIntron

Následující pokyny vysvětlují, jak si můžete aplikovat injekci sám/sama pomocí předplněného pera. Prosím, přečtěte si pečlivě pokyny a krok za krokem se jimi řiďte. Váš lékař Vám poskytne pokyny, jak si přípravek injikovat. Nikdy se nepokoušejte o injekci dříve, než si budete jistý(á), jak předplněné pero používat. Každé předplněné pero je určeno pouze k jednorázovému použití.


Příprava

- Najděte si dobře osvětlenou, čistou a rovnou pracovní plochu, jako je stůl.
- Předplněné pero vyjměte z chladničky. Zkontrolujte datum vytištěné na krabici za EXP a přesvědčte se, že ještě neuplynula doba použitelnosti. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti.
- Předplněné pero vyjměte z krabičky.
- Předplněné pero položte na rovný, čistý povrch a vyčkejte, až se ohřeje na pokojovou teplotu (avšak ne na více než 25 °C). To může trvat až 20 minut.
- Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a teplou vodou. Pracovní plochu, ruce i místo vpichu injekce uchovávejte v čistotě, aby se snížilo riziko infekce.

Budete potřebovat následující položky, které jsou obsaženy v balení:

- předplněné pero (CLEARCLICK)
- jehla ("Push-On Needle")
- 2 alkoholové tampony

Jehla „Push-On-Needle“

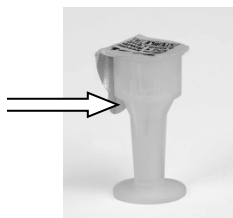

1. Mísení

- Předplněné pero držte ve svislé poloze stupnicí dávek dolů.
- Na stupnici dávek nastavte číslici 1 (viz Obrázek 1). Můžete zaslechnout cvaknutí.



Obrázek 1

- PEREM NETŘEPEJTE, ABY SE PROMÍSIL OBSAH. Obsah promísíte tak, že předplněné pero pozvolna dvakrát obrátíte (viz Obrázek 2).



Obrázek 2

- Podívejte se do okénka. Roztok musí být před použitím čirý a bezbarvý. Může být přítomno několik bublinek, ale to je v pořádku. Pokud je roztok zbarvený nebo pokud obsahuje částice, nepoužívejte jej.

2. Nasazení jehly

- Na stupnici dávek nastavte číslici 2 (viz Obrázek 3). Můžete zaslechnout cvaknutí.



Obrázek 3

- Předplněné pero otřete v místě, kde se nasadí jehla, alkoholovým tamponem (viz Obrázek 4).




Obrázek 4

- Před nasazením jehly ("Push-On Needle") na předplněné pero odstraňte z krytky jehly žlutý papír (viz Obrázek 5).




Obrázek 5

- Držte předplněné pero ve svislé poloze a pevně na něj shora nasad'te jehlu (viz Obrázek 6). Při nasazování jehly můžete zaslechnout jemný zvuk.

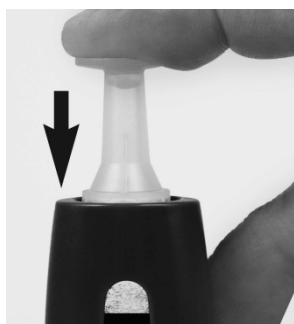

Obrázek 6

- Sejměte krytku jehly. Můžete vidět, jak z jehly vyteče trocha tekutiny. (viz Obrázek 7). To je v pořádku.

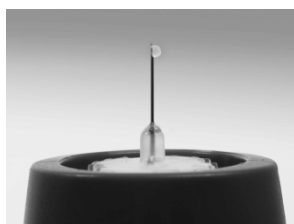

Obrázek 7


3. Nastavení dávky

- Na stupnici dávek nastavte **svou předepsanou dávku** (viz Obrázek 8). Při nastavování můžete zaslechnout cvakání.

Poznámka: při nastavování dávky kryt jehly automaticky VYSKOČÍ (viz Obrázek 9). Před injekcí můžete nastavit jakoukoli dávku (zvýšit a snížit).




Obrázek 8

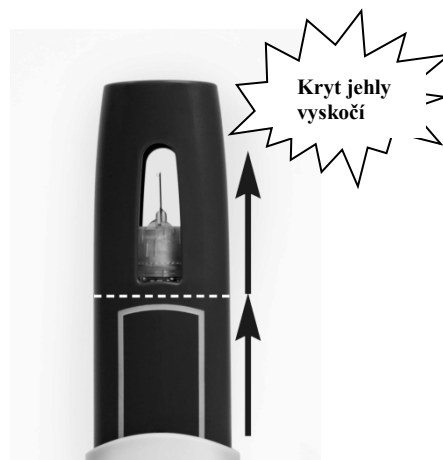

Obrázek 9

Nyní jste připraveni aplikovat injekci

- Na břicho nebo stehně si vyberte místo pro injekci. Vyhněte se pupku a pasu. Pokud jste velmi štíhlý(á), měl(a) byste injekci podávat pouze do stehna. Každou injekci si musíte píchat do jiného místa. Přípravek PegIntron si nepíchejte do míst, kde je kůže podrážděná, zarudlá, s modřinou, infikovaná nebo zjizvená, do strií nebo boulí.
- Místo injekce otřete novým alkoholovým tamponem. Nechejte kůži oschnout.
- V místě, které jste si pro injekci očistil(a), si sevřete kožní řasu.
- Předplněné pero stlačte proti kůži, jak je ukázáno na Obrázku 10. Kryt sklouzne automaticky zpátky, čímž umožní, aby jehla lék aplikovala.
- **Předplněné pero držte proti kůži 15 vteřin.** Poznámka: předplněné pero bude cvakat až 10 vteřin – v závislosti na Vaší dávce. Další 5 vteřin zajistí, že bude podána celá dávka. Poznámka: jakmile předplněné pero vytáhnete z kůže, kryt jehly se na místě uzamkne.

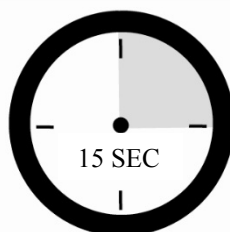



Obrázek 10

Likvidace injekčních materiálů

Předplněné pero, jehla a veškerý injekční materiál jsou určeny pouze k jednorázovému použití a po aplikaci injekce se musí zlikvidovat. Předplněné pero bezpečně zlikvidujte do uzavřené nádoby. O vhodnou nádobu požádejte svého lékaře nebo lékárníka.